



Инструкции за употреба – стерилни напълнени с азот флакони Anoxos
Версия 2. Дата на издаване: 04 февруари 2025 г.

Този документ има за цел да предостави най-добрата практическа информация за използването на стерилните напълнени с азот флакони, за да се гарантира безопасността и действието на продукта и да се запази стерилността отвътре.

Предназначение и потребители:

Временно съхранение на произведени от клиента материали за парентерално приложение, за използване от обучени медицински специалисти.


Базов UDI-DI: 50566720VNSYK

Предпазни мерки:

- Този продукт е стерилен отвътре, винаги използвайте асептична техника за достъп до флакона:
- Не използвайте, ако стерилната бариера (капачка и уплътнение) изглежда манипулирана или е отстранена.
- Не използвайте повторно игли или спринцовки за пълнене и изпразване на флакона.
- Не оставяйте игли или спринцовки във флаконите за последващо изтегляне на лекарство.
- Не използвайте, ако срокът на годност е изтекъл.

Указания за употреба


1. Съберете всички необходими материали (тампон със спирт, игла или спринцовка и изделието).
2. Отстранете бутона Flip-off® от алуминиевото уплътнение.

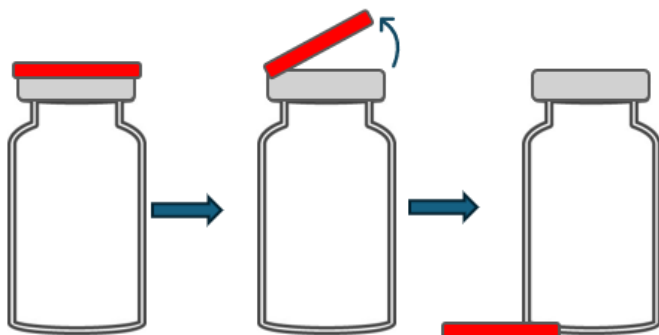

3. Дезинфекцирайте мястото на инжектиране на флакона с тампон, напоен с алкохол. Внимавайте да не докосвате капачката след дезинфекция.



4. Пробийте капачката с игла и напълнете с продукт (вкарайте иглата в кръгчето в средата на капачката, перпендикулярно на флакона, както е показано). Препоръчва се медицинските специалисти и крайните потребители да следват най-добрите практики като пробиване перпендикулярно на повърхността на капачката и в рамките на целевия кръг, за да се избегне увреждането ѝ; пробиване с подходяща скорост и ограничаване на повторното използване на иглите, за да се намалят рисковете от разцепване и фрагментиране на капачката.

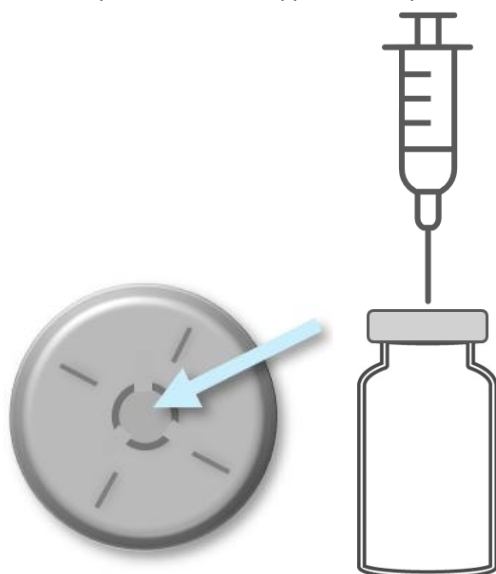

5. Съхранявайте флакона според изискванията за продукта, докато се изисква да има съдържание.
6. За да изтеглите продукта, дезинфекцирайте мястото на инжектиране на флакона с тампон със спирт и пробийте капачката, както е описано по-горе, и изтеглете продукта според необходимата доза и процедури.
7. Изхвърлете използваните флакони и игли в съответствие с приложимите разпоредби.

Предпазни мерки

Продуктът е за еднократна употреба, не се препоръчва да се преработва по какъвто и да е начин. Повторната употреба може да компрометира работата и безопасността на изделието и може да причини замърсяване поради нарушаване на стерилността.

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган в държавата членка на потребителя и/или пациента.



ADELPHI

HEALTHCARE PACKAGING

ADELPHI HEALTHCARE PACKAGING

Olympus House, Mill Green Road
Haywards Heath, RH16 1XQ
United Kingdom

T +44 (0)1444 472300
F +44 (0)1444 472329
E sales@adelphi-hp.com
www.adelphi-hp.com



Advena Medical Ltd, Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swatar, Malta



MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM, The Hague
The Netherlands

