



Pokyny k použití – Anoxos Sterilní lahvičky naplněné dusíkem
Verze 2. Datum vydání 04. únor 2025

Tento dokument obsahuje informace o osvědčených postupech při používání sterilních lahviček plněných dusíkem pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti výrobku a zachování neporušené vnitřní sterility.

Určené použití a uživatelé:

Dočasné skladování materiálů vyrobených zákazníkem pro parenterální podání, určeno k použití vyškolenými zdravotnickými pracovníky.


Základní UDI-DI: 50566720VNSYK

Předběžná opatření:

- Tento přípravek je vnitřně sterilní, k manipulaci s lahvičkou vždy používejte aseptickou techniku a vyvarujte se:
- Použití, pokud to vypadá, že sterilní bariéra (zátky a těsnění) byla porušena nebo odstraněna.
- Opakovaného použití jehly nebo injekční stříkačky pro plnění a vyprazdňování lahvičky.
- Zanechání jehly nebo injekční stříkačky v lahvičce pro další použití léčiva.
- Použití po uplynutí data expirace.

Pokyny k použití

1. Přichystejte si všechny potřebné materiály (alkoholový tampon, jehlu nebo stříkačku a pomůcku).
2. Odstraňte z tlačítka Flip-Off® hliníkové těsnění.

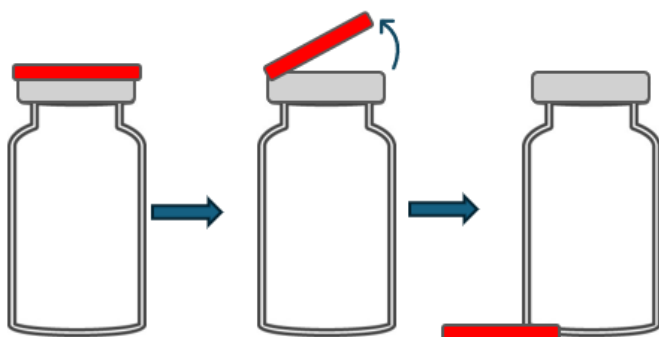

3. Místo vpichu injekční lahvičky vydezinfikujte alkoholovým tamponem. Dejte pozor, abyste se po vydezinfikování nedotkli zátky.




ADELPHI
HEALTHCARE PACKAGING

ADELPHI HEALTHCARE PACKAGING

Olympus House, Mill Green Road
Haywards Heath, RH16 1XQ
United Kingdom

T +44 (0)1444 472300
F +44 (0)1444 472329
E sales@adelphi-hp.com
www.adelphi-hp.com

4. Zátku propíchněte jehlou a naplňte ji přípravkem (jehlu zasuňte do kruhu uprostřed zátky kolmo k lahvičce, jak je znázorněno na obrázku). Zdravotnickým pracovníkům i koncovým uživatelům doporučujeme dodržovat osvědčené postupy – zátku je třeba propíchnout kolmo k jejímu povrchu a uvnitř znázorněného kruhu, aby nedošlo k zasažení nožiček zátky, propíchnout ji vhodnou rychlostí a omezit opakované použití jehel, aby se snížilo riziko protržení a fragmentace zátky.

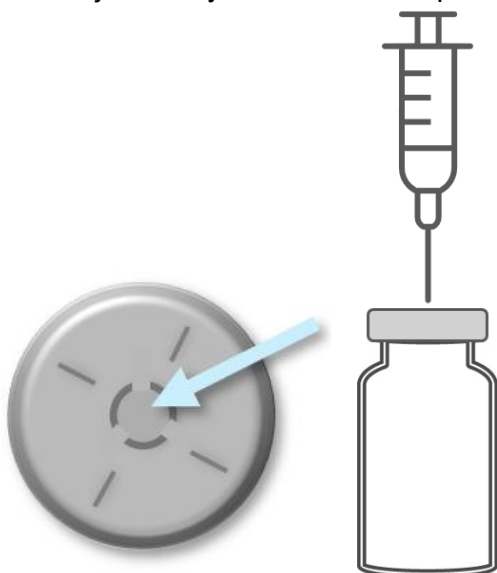


5. Uchovávejte lahvičku podle pokynů na produktu, dokud její obsah nebude potřeba.
6. Chcete-li přípravek odebrat, vydezinfikujte místo vpichu injekční lahvičky alkoholovým tamponem, propíchněte zátku podle výše uvedených pokynů a natáhněte přípravek podle požadovaného dávkování a postupů.
7. Použité injekční lahvičky a jehly zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

Varování

Výrobek je na jedno použití, nedoporučuje se ho jakkoliv znovu zpracovávat. Opakované použití by mohlo ohrozit výkon a bezpečnost prostředku a způsobit kontaminaci v důsledku ztráty sterility.

Veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti s pomůckou, je třeba hlásit výrobci a kompetentním úřadům členského státu, ve kterém sídlí uživatel a/nebo pacient.

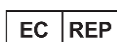

Advena Medical Ltd, Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swatar, Malta



MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM, The Hague
The Netherlands

STERILE A

Adelphi Healthcare Packaging is the trading name of Adelphi (Tubes) Ltd. Registered in England. Company No. 985399
Registered Office: Olympus House, Mill Green Road, Haywards Heath, West Sussex RH16 1XQ

Technická dokumentace k balení Adelphi Healthcare – Pokyny k použití