



Bruksanvisning – Anoxos Sterile nitrogenfylte hetteglass
Versjon 2. Utstedelsesdato 4. februar 2025

Dette dokumentet er utformet for å gi beste praksis-informasjon ved bruk av sterile nitrogenfylte hetteglass for produktets sikkerhet og ytelse, samt opprettholde den interne steriliteten.

Tiltenkt bruk og brukere:

Midlertidig lagring av kundeproduserte materialer for parenteral administrering, for bruk av medisinsk faglig personale.


Grunnleggende UDI-DI: 50566720VNSYK

Forholdsregler:

- Dette produktet er internt sterilt, bruk en aseptisk teknikk ved tilgang til glasset hver gang, og ikke:
- Bruk hvis den sterile barrieren (kork og forsegling) virker å ha blitt tuklet med eller har blitt fjernet.
- Gjenbruk nåler eller sprøyter for fylling og tømming av glasset.
- La nåler eller sprøyter være i glass for påfølgende uttrekking av medikament.
- Bruk hvis utløpsdato er overskredet

Bruksanvisning

1. Samle alt nødvendig materiale (spritserviett, nål eller sprøyte og enheten).
2. Fjern Flip-Off®-knappen fra aluminiumsforseglingen.

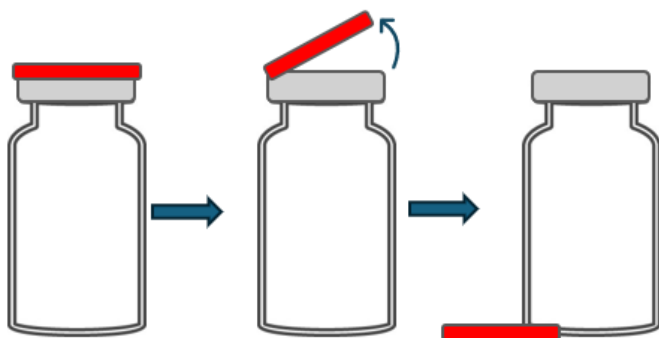

3. Desinfiser hetteglassinjeksjonsstedet med en spritserviett. Forsiktig, ikke berør korken etter desinfisering.
4. Stikk nålen gjennom korken og fyll med produkt (før nålen inn i sirkelen i midten av korken som vist, vinkelrett i forhold til glasset). Det anbefales at helsepersonell og sluttbrukere



ADELPHI


HEALTHCARE PACKAGING

ADELPHI HEALTHCARE PACKAGING

Olympus House, Mill Green Road
Haywards Heath, RH16 1XQ
United Kingdom

T +44 (0)1444 472300
F +44 (0)1444 472329
E sales@adelphi-hp.com
www.adelphi-hp.com

følger beste praksis, slik som å stikke vinkelrett mot korkens overflate, og innenfor målsirkelen for å unngå å treffe korkbein, før inn med passende hastighet, og begrense gjenbruk av nåler for å redusere risikoen for korkkorrosjon og -fragmentering.

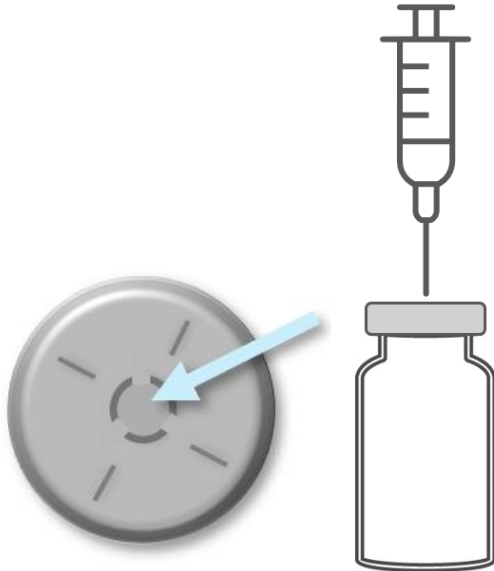

5. Lagre hetteglass i henhold til kravene for ditt produkt til innholdet trengs.
6. For å trekke ut produktet desinfiseres glassets injeksjonssted med en spritserviett, og stikk gjennom korken i henhold til ovenstående, og trekk opp produkt som nødvendig i henhold til din dosering og prosedyrer.
7. Avhend brukte hetteglass og nåler i henhold til gjeldende reguleringer.

Advarsler

Produktet er for engangsbruk, det anbefales ikke å gjenvinne artikkelen på noen måte. Gjenbruk kan kompromittere ytelsen og sikkerheten for enheten, og kan føre til forurensning grunnet tap av sterilitet.

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forhold til enheten bør rapporteres til produsenten og kompetent myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten befinner seg.



Advena Medical Ltd, Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swatar, Malta



MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM, The Hague
The Netherlands



Adelphi Healthcare Packaging is the trading name of Adelphi (Tubes) Ltd. Registered in England. Company No. 985399
Registered Office: Olympus House, Mill Green Road, Haywards Heath, West Sussex RH16 1XQ

Adelphi Healthcare Emballasje Teknisk fil – Informasjon for bruk