



Instrucțiuni de utilizare - Flacoane sterile Anoxos umplute cu azot
Versiunea 2. Data emiterii: 04 februarie 2025

Acest document are scopul de a furniza cele mai bune practici pentru utilizarea flaconelor sterile umplute cu azot, în vederea asigurării siguranței și performanței produsului și a păstrării integrității sterilității interne.

Utilizare prevăzută și utilizatori prevăzuți:

Depozitare temporară a materialelor produse de client pentru administrare parenterală, a se utiliza de către profesioniști instruiți în domeniul sănătății.


UDI-DI de bază: 50566720VNSYK

Precauții:

- Acest produs este steril intern, utilizați de fiecare dată o tehnică aseptică pentru a accesa flaconul și nu:
- Utilizați dacă bariera sterilă (opritorul și sigiliul) pare să fie alterată sau a fost înlăturată.
- Reutilizați acele sau seringile pentru umplerea sau golirea flaconului.
- Lăsați acele sau seringile în flacoane pentru extragerea ulterioară a medicației.
- Utilizați dacă data de expirare a fost depășită

Instrucțiuni de utilizare

1. Obțineți toate materialele necesare (tampon cu alcool, ac sau seringă și dispozitivul).
2. Îndepărtați butonul Flip-Off® din sigiliul de aluminiu.

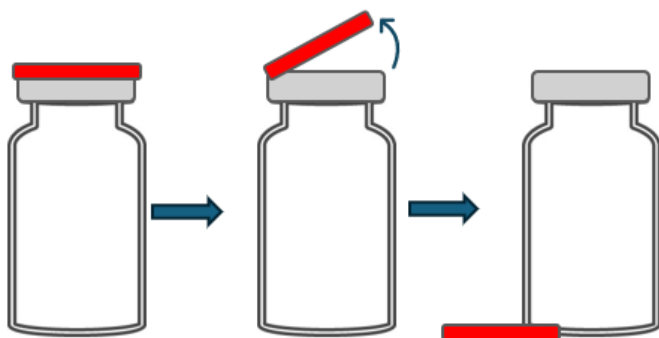

3. Dezinfectați locul de injectare a flaconului folosind un tampon cu alcool. Manifestați precauție pentru a nu atinge opritorul după dezinfectare.
4. Perforați opritorul cu acul și umpleți cu produs (introduceți acul în cercul aflat în mijlocul opritorului, așa cum este indicat, perpendicular cu flaconul). Se recomandă ca profesioniștii




ADELPHI
HEALTHCARE PACKAGING

ADELPHI HEALTHCARE PACKAGING

Olympus House, Mill Green Road
Haywards Heath, RH16 1XQ
United Kingdom

T +44 (0)1444 472300
F +44 (0)1444 472329
E sales@adelphi-hp.com
www.adelphi-hp.com

din domeniul sănătății și utilizatorii finali să respecte cele mai bune practici, cum ar fi perforarea perpendiculară cu suprafața opritorului și în zona inelului țintă, pentru a se evita lovirea piciorușelor opritorului, perforarea cu o viteză adecvată și limitați reutilizarea acelor pentru a ajuta la reducerea riscului de carotaj și fragmentare a opritorului.

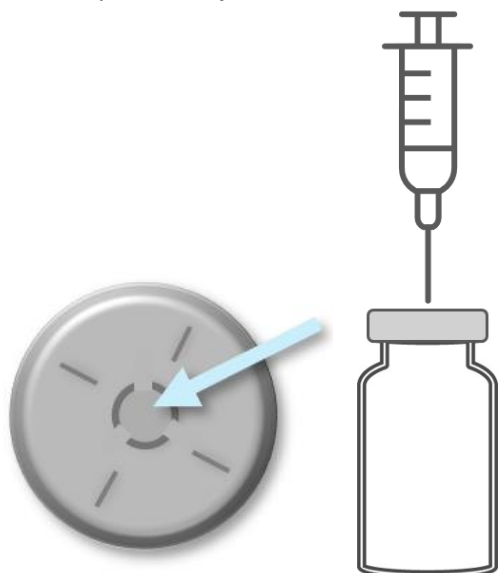


5. Depozitați flaconul conform cerințelor produsului dumneavoastră, până când este necesar conținutul.
6. Pentru a extrage produsul, dezinfecțați zona de injectare a flaconului folosind un tampon cu alcool și perforați opritorul așa cum se descrie mai sus și extrageți produsul după necesități, conform dozajului și procedurilor dumneavoastră.
7. Eliminați flacoanele și acele utilizate, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Precauții:

Produsul este de unică folosință și nu se recomandă reprocesarea elementului în niciun mod. Reutilizarea ar putea compromite performanța și siguranța dispozitivului și poate cauza contaminare din cauza pierderii sterilității.

Orice incident grav care a avut loc în relație cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorităților competente din Statul Membru, în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit.

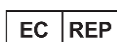

Advena Medical Ltd, Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swatar, Malta



MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM, The Hague
The Netherlands

STERILE A

Adelphi Healthcare Packaging is the trading name of Adelphi (Tubes) Ltd. Registered in England. Company No. 985399
Registered Office: Olympus House, Mill Green Road, Haywards Heath, West Sussex RH16 1XQ

Fișier tehnic de ambalare Adelphi Healthcare - Informații de utilizare